



InSite | *Listeria spp*

INSITE es un test rápido y fácil de emplear para la detección de especies de *Listeria* en plantas procesadoras de alimentos. El test contiene un medio líquido formulado con potenciadores del crecimiento, antibióticos y compuestos cromogénicos específicos para el desarrollo de especies de *Listeria*.

Un cambio de color de amarillo a marrón claro / negro es un resultado presuntamente positivo.

Beneficios:

- Fácil de utilizar, no requiere preparación previa
- Con esponja alargada que maximiza la toma de muestra para resultados precisos
- Resultados fáciles de interpretar marrón/negro indica la presencia de especies de *Listeria*
- Resultados positivos en solo 24 horas
- Resultados presuntamente negativos en 48 horas
- Todo en un solo dispositivo, eliminando el riesgo de contaminación
- Caducidad: 9 meses almacenado en nevera de 2-8 °C

Sensibilidad:

- De 1-10 CFU/mL *Listeria spp.*
- Detecta niveles bajos de *L. monocytogenes* estresadas térmicamente (10-50 cfu/ml de caldo) incluso en presencia de un alto número de microorganismos competidores.




Ve a una demostración en este video de [youtube.com/HygienaTV](https://www.youtube.com/HygienaTV)




Descubra videos instructivos, soporte documental y más en www.hygiena.com

Interpreting Results

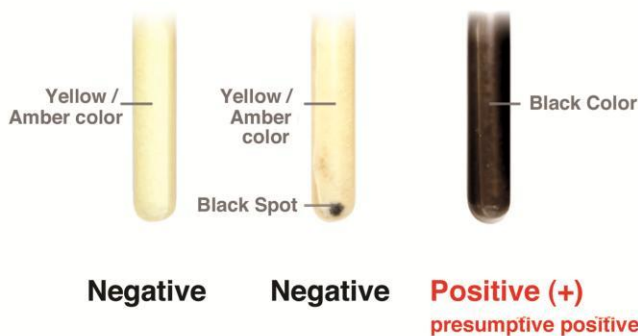

Referencia	Descripción	Cantidad
IL050	InSite Environmental <i>Listeria spp.</i> (Caja de 50)	50
IL100	InSite Environmental <i>Listeria spp.</i> (Caja de 100)	100

Procedimiento:

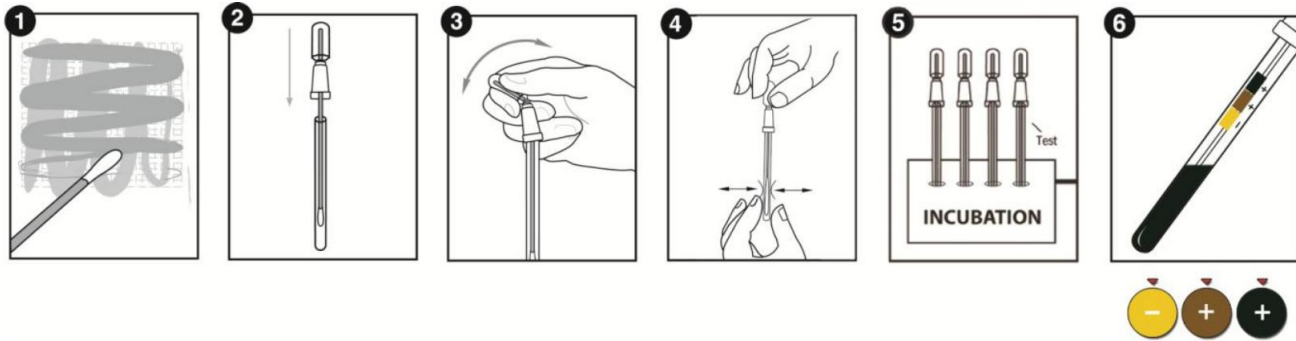

Productos relacionados:

Incubadoras digitales de bloque seco

Estas incubadoras digitales son capaces de alcanzar los 105 °C y se adaptan a cualquier dispositivo de la marca Hygiena.

Disponible en dos formatos. Los bloques de alojamiento se venden por separado.

MicroSnap Coliformes

MicroSnap coliformes es una prueba rápida para la detección y recuento de bacterias coliformes. Los resultados están disponibles en 8 horas o menos, dependiendo del nivel de detección requerido.

Niveles de microorganismos de un dígito disponibles en 8 horas o menos, dependiendo del nivel de detección requerido. MicroSnap Coliformes detecta hasta 1-10 UFC.

MicroSnap E. coli

MicroSnap E. coli es un test rápido para la detección y enumeración de E. coli. Los resultados están disponibles en 8 horas o menos, dependiendo del nivel requerido de detección.

Microsnap E. coli detecta a 1-10 CFU.

MicroSnap Total

Microsnap Total proporciona resultados de recuento total en 7 horas, lo que nos permite obtener resultados en el mismo día. Microsnap Total detecta niveles < 100 CFU de bacterias facultativas anaeróbicas Gram positivas y Gram negativas.

MicroSnap Enterobacterias

MicroSnap EB ofrece resultados en 7 horas, lo cual no permite conocer los niveles microbianos en el mismo día de trabajo o turno. MicroSnap EB es capaz de detectar niveles de 1-50 UFC.



Referencia	Descripción	Cantidad
Ver catálogo	Incubadoras digitales de bloque seco	1
MS2-TOTAL	MicroSnap Total	100
MS2-COLIFORM	MicroSnap Coliformes	100
MS2-ECOLI	MicroSnap E.coli	100
MS2-EB	MicroSnap Enterobacterias	100